


OPTIONS DE DISPOSITIF PRECICE®

La gamme de produits PRECICE propose des options fémorales et tibiales. Le système permet de multiples configurations et options de taille pour s'adapter au mieux à l'anatomie de chaque patient.

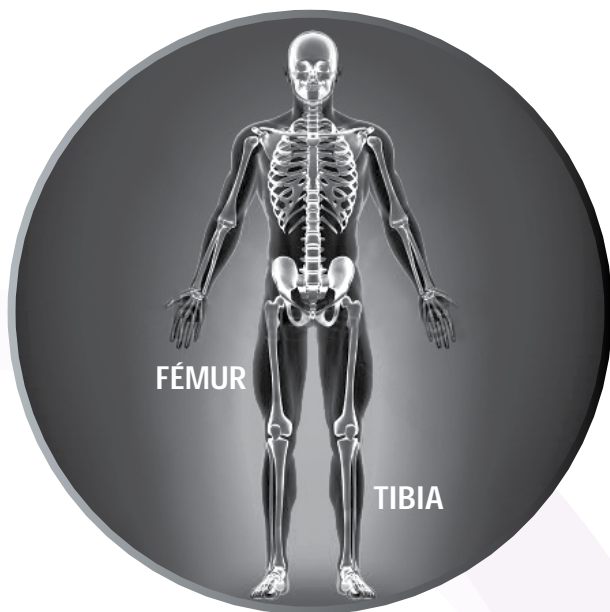

SYSTÈME D'ALLONGEMENT DES MEMBRES PAR INSTRUMENTATION INTRAMÉDULLAIRE PRECICE

- Ayant reçu l'autorisation de la FDA pour l'allongement du fémur et du tibia.
- Efficace en seulement sept minutes par jour.
- Comporte une technologie de télécommande de pointe.
- Élimine la nécessité d'une fixation externe pour la plupart des patients.



Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez contacter votre représentant commercial agréé.

101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, CA 92656
Téléphone : (+1) 949-837-3600
Fax : (+1) 949-837-3664

CE REP Maastrichterlaan 127 - 129 - NL 6291 EN Vaals
Téléphone : (+31) 43-306-3320
Fax : (+31) 43-306-3338

CE 0297

©2017. NuVasive, Inc. Tous droits réservés. et NuVasive sont des marques déposées de NuVasive, Inc. PRECICE est une marque déposée de NuVasive Specialized Orthopedics aux États-Unis et peut être déposée dans d'autres pays. NuVasive Specialized Orthopedics est une marque de NuVasive, Inc.

Rx Only.

Le système d'allongement des membres par instrumentation intramédullaire (IMLL) PRECICE® se compose d'un clou intramédullaire implantable, de vis de fixation, d'instruments réutilisables et d'une télécommande (ERC) portable. Le clou PRECICE est un dispositif stérile à usage unique implanté par voie chirurgicale à l'aide des instruments et des vis de fixation. L'ERC est utilisée chaque jour après l'implantation afin d'allonger ou de raccourcir l'implant de manière non effractive pour obtenir une longueur prescrite. Le système PRECICE est destiné à l'allongement du fémur et du tibia. Les contre-indications incluent les suivantes : infection ou pathologies de l'os telles qu'ostéopénie, qui ne permettraient pas de fixer correctement le dispositif ; allergies et sensibilités au métal ; patients chez lesquels la distance entre la surface du membre traité et le canal intramédullaire est supérieure à 51 mm pour les implants de diamètres 10,7 et 12,5 mm ou supérieure à 38 mm pour l'implant de diamètre 8,5 mm ; patients ayant un diamètre d'os irrégulier, qui ne permettrait pas l'insertion du clou PRECICE ; patients chez lesquels le clou PRECICE traverserait les espaces articulaires ou ouvrirait les cartilages épiphysaires ; patients présentant un canal médullaire obstrué ou d'autres pathologies tendant à retarder la cicatrisation, telles que limitations de l'irrigation, acrosyndrome ou signes de vascularisation inadéquate ; patients refusant ou incapables de suivre les instructions relatives aux soins postopératoires ; patients pesant plus de 114 kg pour les implants de diamètres 10,7 et 12,5 mm (modèles A-G, H, J, K et U) ou pesant plus de 57 kg pour les implants de diamètres 8,5 et 10,7 mm (modèles A-G, H, J, K, U, N, M, P et Q). L'utilisation du dispositif implantable doit être réservée à un médecin titulaire formé. Veuillez consulter le mode d'emploi du système IMLL PRECICE pour connaître toutes les informations importantes relatives à la sécurité. **Mise en garde : En vertu de la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.**

16-NUVA-1573

PRECICE®

ADJUSTABLE SOLUTIONS
FOR ORTHOPEDICS



Une option thérapeutique révolutionnaire
pour les patients présentant des
inégalités de longueur des membres

Solutions personnalisables pour l'orthopédie


SI VOUS DEVEZ SUBIR UN ALLONGEMENT DE MEMBRE, VOUS N'ÊTES PAS SEUL(E).

Des milliers d'interventions d'allongement du fémur et du tibia sont effectuées chaque année.



QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME D'ALLONGEMENT DES MEMBRES PAR INSTRUMENTATION INTRAMÉDULLAIRE PRECICE® ?

PRECICE est un dispositif interne d'allongement des membres qui peut être réglé par télécommande. Cette avancée de la technologie non effractive permet à votre médecin de personnaliser le traitement en fonction de vos besoins individuels.

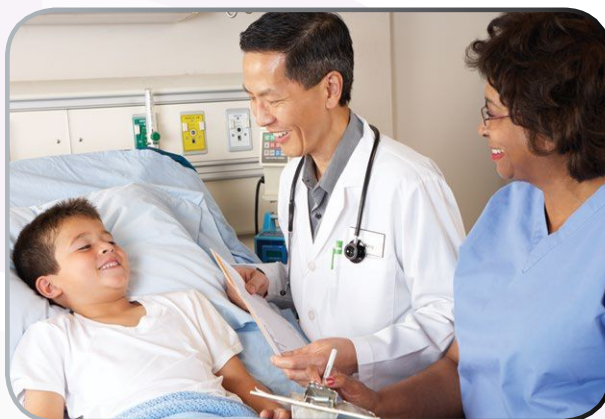

QUE PUIS-JE FAIRE POUR FAVORISER UN EXCELLENT RÉSULTAT ?

- Ne marchez pas et ne participez pas à des activités entraînant une mise en charge de plus de 20 % de votre poids sur la jambe implantée avant que votre médecin vous y autorise.
- Prenez toutes les vitamines et tous les médicaments prescrits par votre médecin.
- Pour en savoir plus, consultez toujours les informations destinées aux patients et le manuel d'instruction fournis par votre médecin. Ce manuel doit être lu en intégralité avant d'utiliser l'ERC.

QU'EST-CE QUE LA TÉLÉCOMMANDE EXTERNE (ERC) ?

La télécommande externe, ou ERC, est la clé du réglage non effractif de l'implant PRECICE. L'unité ERC est programmée par votre médecin ou son équipe, en fonction de vos besoins individuels en matière d'allongement. Cette programmation personnalisable de l'ERC permet des séances d'allongement dans le confort de votre domicile.

UTILISATION DE L'ERC

- Suivez systématiquement les instructions de votre médecin.
- Placez l'ERC portable en contact direct avec votre peau, au-dessus du clou implanté.
- Les flèches imprimées sur l'ERC portable doivent toujours être orientées vers vos pieds.
- N'utilisez pas l'ERC à moins de 60 cm d'objets métalliques non fixés, pour qu'ils ne soient pas attirés par les aimants de l'ERC.

