

PRECICE Remote Controller

Instructions d'utilisation:



Attention: Aimants très puissants
 (Ne pas approcher d'appareils électroniques ni cartes de crédits)

1. Mise en fonctionnement



Brancher le fil d'alimentation

2. Attendre que les tests soient terminés



l'écran de démarrage apparaît

Ecran de démarrage



= Allongement par session

= Allongement réalisé

La distraction osseuse quotidienne est habituellement de 1 mm


En fonction des recommandations de votre chirurgien, ceci sera fait en 2 ou 3 sessions par jour.

Votre protocole

■ 2 sessions : 0,50mm matin 0,50mm soir Total 1,00 mm

3. Positionner l'appareil comme sur la photo sur la marque cutanée (la flèche dirigée vers les pieds)

Ne pas utiliser les boutons jaune et verts

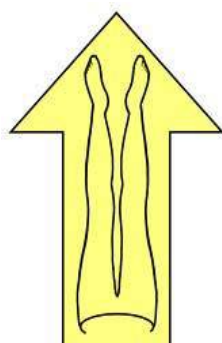


Première session :

- Mettre l'appareil en marche. appuyer sur F1
- Attendre que l'appareil s'arrête automatiquement
- Débrancher l'appareil

Deuxième session :

- Mettre l'appareil en marche. Attendre que l'écran de démarrage apparaisse
- Appuyer sur la flèche en haut à gauche de l'écran pour remettre à zéro
- Lancer l'allongement (F1)
- Attendre que l'appareil s'arrête automatiquement (1,00mm)

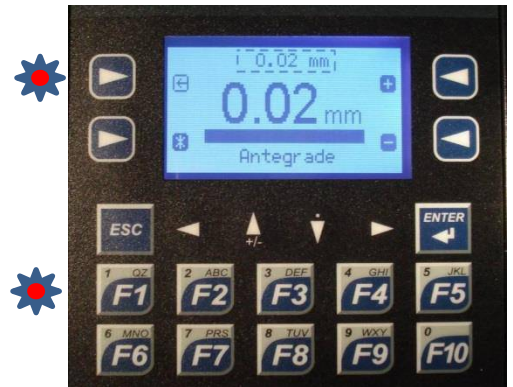

N'utilisez aucun autre bouton et n'entrez pas de nouveaux codes !!!

Si un écran ou un menu inconnus apparait appuyer sur **F6** ...
et vous reviendrez à l'écran de démarrage

En cas de questions ou problèmes, merci d'appeler

SPINAXIS:

Tel 01 46 51 22 89